

Heegbach

Apotheke & Sanitätshaus



für ein Leben in Bewegung!

Betten
Programm
2025



Ein Pflegebett sollte sowohl den Komfort für den Patienten sicherstellen als auch eine benutzerfreundliche Handhabung bieten, beispielsweise durch eine geeignete Pflegehöhe, unkompliziertes Beziehen, Reinigung sowie einen einfachen Auf- und Abbau.

Heegbach Apotheke & Sanitätshaus

64390 Erzhausen | Bahnstraße 92 | Telefon 06150 / 81919

sanitaetshaus@heegbach-apotheke.de



Ein Pflegebett sollte verschiedene Ansprüche und Bedürfnisse erfüllen. Dabei ist nicht nur das Wohlbefinden des Patienten entscheidend, sondern auch die einfache Bedienbarkeit für das Pflegepersonal. Wichtige Aspekte sind etwa eine passende Pflegehöhe, das unkomplizierte Wechseln der Bettwäsche, eine komfortable Reinigung des Bodens unter dem Bett sowie ein einfacher Auf- und Abbau.

Das moderne Pflegebett bietet eine flexible Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen. Die Höhe kann stufenlos verstellt werden, während sich die Liegefläche mehrfach justieren lässt. Sowohl Kopf- als auch Fußteil sind individuell einstellbar. Die Verstellungen erfolgen entweder manuell oder elektrisch über Motoren.



Es gibt eine breite Palette an Zubehör, das Ihnen den Alltag erleichtern kann. Wir helfen Ihnen gerne dabei, das für Ihre individuellen Bedürfnisse passende Produkt zu finden.

Erhöhte Sicherheit und Bequemlichkeit

Wir stellen Pflegebetten bereit, die sowohl sicher als auch einfach zu handhaben sind. Für weitere Details sprechen Sie uns gerne an.



Erhöhter Komfort im eigenen Zuhause

Zeitgemäße Pflegebetten sind beweglich und können beim Beziehen oder Umlagern problemlos von der Wand weggerückt werden. Optimalerweise erlaubt das Bett einen Ausblick aus dem Fenster und schützt gleichzeitig vor intensiver Sonneneinstrahlung.



Einlegerahmen

Ein Einlegerahmen umfasst alle wesentlichen Funktionen eines Pflegebettes und lässt sich in normale Bettrahmen einbauen. Er ist mit einem elektromotorischen Lattenrost ausgestattet und eignet sich sowohl für Einzel- als auch für Doppelbetten.



Niedrigbetten

Niedrigbetten lassen sich auf eine Höhe von ungefähr 22 bis 30 cm absenken, was das nächtliche Aufstehen sicherer macht. Für Menschen mit Demenz kann dadurch sogar auf sturzsichernde Seitengitter verzichtet werden.





Pflegebetten nehmen für die Betroffenen oft eine zentrale Rolle ein und müssen daher bestimmte Kriterien erfüllen:

- Eine komfortable Lagerung der Person gewährleisten, um entspanntes Ruhen und Schlafen zu ermöglichen
- Eine Anpassung der Lagerung an Körperform, Gewicht und Krankheitsbild des Patienten sicherstellen
- Dem Pflegepersonal ergonomische Arbeitsbedingungen für die täglichen Abläufe bieten
- Den speziellen Hygieneanforderungen im Pflegebereich gerecht werden





Das Lagern, Umbetten und Umsetzen von Pflegebedürftigen spielt im Pflegealltag eine zentrale Rolle. Unterschiedliche Bewegungseinschränkungen der Betroffenen erfordern häufig einen erhöhten Hilfebedarf seitens der Pflegekräfte, was deren körperliche Belastung steigert. Daher ist es besonders wichtig, ungünstige oder falsche Bewegungsabläufe sowie Tragevorgänge nicht nur zu minimieren, sondern auch gezielt zu verbessern. Positionswechsel sind dabei ein wesentlicher Bestandteil verschiedener prophylaktischer Maßnahmen, da sie nicht nur der Veränderung der Lagerung dienen.



Diese Matratze vereint zwei wesentliche Eigenschaften. Einerseits hilft sie, das nachlassende Körpergefühl und die dadurch entstehenden Schlafprobleme zu reduzieren. Andererseits bekämpft der integrierte Bewegungssensor effektiv das problematische Verhalten des Bettfluchtens.

Diese Matratze eignet sich besonders für Demenzformen, bei denen trotz der Verbesserung des Körpergefühls durch die Matratze weiterhin Bettflucht auftritt.



Bettflucht-Warnsystem

Ein Bettflucht-Warnsystem, das für alle Matratzen geeignet ist und jederzeit nachgerüstet werden kann, warnt rechtzeitig, also früh genug, wenn eine demenzkranke Person das Bett verlassen möchte. Dieses Frühwarnsystem funktioniert durch einen Belastungssensor, der einfach unter dem Matratzenrand angebracht wird. Sobald die Bettkante belastet wird, aktiviert der Sensor einen Alarm, der visuell und/oder akustisch signalisiert wird.



Kompetenz, die hilft...

Die präsentierten Produkte stellen lediglich einen Teil unseres umfangreichen Sortiments dar. Wir bieten zahlreiche Hilfsmittel für den Transfer, die Umsetzung und Lagerung, um sowohl Patienten als auch Pflegekräfte zu entlasten.

Mit einer Aufsteh-Hilfe kann der Patient seine Bewegungen selbst kontrollieren, wird so sicherer und der Vorgang des Umsetzens deutlich vereinfacht. Der Patient stellt seine Füße auf die Scheibe und zieht sich aus eigener Kraft in eine aufrechte Position. Die Pflegekraft dreht die Aufsteh-Hilfe, bis der Patient sich wieder herablassen kann.



Ein Drehkissen unterstützt dabei, bequem ins Auto hinein- und herauszugelangen.

Leichter, nachhaltiger und noch praktischer: domiflex® 3



Mit seinem Facelift bedeutet das bock domiflex® 3 ab Mitte 2024 einen noch größeren Schritt in die Zukunft einer besseren Pflegeversorgung zu Hause. Sowohl für Leistungserbringer als auch für Pflegende und Pflegebedürftige ist das domiflex® 3 die optimale Lösung für die häusliche Pflege. Bereits das Standardmodell verfügt über einen vergrößerten Höhenverstellbereich von 35 – 80 cm und ein erhöhtes Patientengewicht bis 155 kg bzw. über eine erhöhte sichere Arbeitslast bis 190 kg.

Facelift von domiflex® 3

Maße (Werte für 100 cm Breite in Klammern)

Außenmaß	1 03 (113) × 21 0,7 cm
Liegefläche	90 (100) × 200 cm
Sondermaße	Verlängerung auf 220 cm möglich
Höhenverstellung	35 – 80 cm
Lifterunterfahrbarkeit	> 15 cm

Gewichte (Gew. mit Ver. stärkungsstreb in Klammern)

Max. Personengewicht	1 55 (185) kg
Sichere Arbeitslast	1 90 (220) kg

Neues, verringertes Bettge

Max. Gewicht pro Baugruppe	71,4 kg
	< 15,8 kg

Hilfsmittel-Nr. 90 cm (185 kg Personengew. in Klammern)

GKV:	19.40.01.3 (19.40.01.3 044 047)
Pflegekasse:	50.45.01.1 (50.45.01.1 083 085)

Hilfsmittel-Nr. 100 cm (185 kg Personengew. in Klammern)

GKV:	19.40.01.3 (19.40.01.3 048 046)
Pflegekasse:	50.45.01.1 (50.45.01.1 086 087)

Motoren

Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab Steckdose.

Verkleinerter CO₂-Fußabdruck


Besseres Handling durch geringeres Gewicht

Aufrichter mit Triangel-Griff

Bei Bedarf schnell und werkzeuglos auf 220 cm verlängerbar

Integrierte, durchgehende Seitensicherung SR3 für optimalen Schutz

Kabelgebundener Handschalter mit Sperrfunktion und vielfältigen Verstellmöglichkeiten

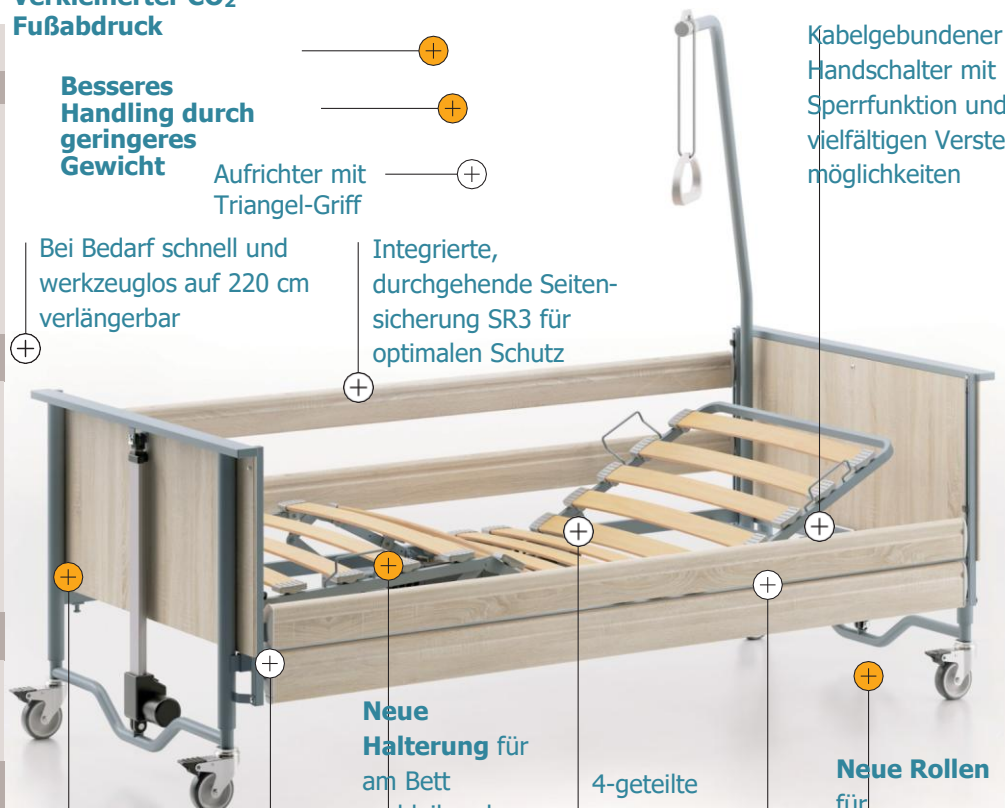

Neue Halterung für am Bett verbleibendes Transportsystem

4-geteilte Liegefläche mit komfortablen Federholzleisten

Neue Rollen für einfacheres Arretieren

Neue Stellteile für mehr Komfort bei weniger Gewicht

Im Facelift noch leichtere Bau- gruppen und werkzeuglose Verbindungstechnik für schnellen Auf- und Abbau

Absenkbare auf 35 cm für sicheren Ein- und Ausstieg

Die Vorteile im Überblick



Höhenverstellbereich 35 – 80 cm

- ⊕ Erweiterter Höhenverstellbereich von 35 – 80 cm Ergonomischer und
- ⊕ komfortabler Ein- und Ausstieg bei 35 cm Rückenschonende und einstellbare Pflegehöhe bis 80 cm



Zwei Dekore zur Auswahl

- ⊕ Buche gedämpft
- ⊕ Sonoma Eiche hell



Kabelgebundener Handschalter

- ⊕ Mit Sperrfunktion und vielen
- ⊕ Verstellmöglichkeiten Softe Tasten sorgen für eine angenehme Haptik Sichere Kontaktbestätigung



Umfangreiches Zubehörprogramm

- ⊕ Mehr Sicherheit, z.B. mit der Verstärkungsstrebe erhöhtes maximales Patientengewicht von 185 kg



Transport- und Lagerungssystem

- ⊕ Das platzsparende Transport- und Lagerungssystem sowie leichte Baugruppen ermöglichen ein einfaches Handling



Werkzeuglose Verbindung

- ⊕ Die werkzeuglose Verbindungstechnik sorgt für einen schnellen Auf- und Abbau



aks-L4

- hohe Variabilität durch viergeteilte Liegefläche in Metallgitter oder Holzfederleisten
- Rückenteil und Oberschenkelteil elektrisch verstellbar
- Rollen einzeln feststellbar
- beidseitig integrierte Seitengitter
- einfacher Auf- und Abbau durch eine Person
- Handbedienung mit Großtasten und integrierter Sperrfunktion
- inklusive Aufrichter und Haltegriff
- 3 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten
- unverpackte Lieferung auf Transporthilfe
- Höhe der Liegefläche von 40-80 cm vom Boden stufenlos einstellbar
- Patientengewicht bis 150 kg und sichere Arbeitslast bis 185 kg

Optionen und Zubehör

- Seitengittererhöhung u. a. für den Einsatz von Großzellenmatratzen
- Seitengitterpolsterung
- Bett- und Matratzenverlängerung zur Versorgung größerer Patienten
- Aufstehhilfe
- Infusionshalter
- Fußtieflagerung (FTL)
- verpackte Lieferung auf Palette

HMV-Nummern

aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter - 19.40.01.3247

aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten - 19.40.01.3245

Pflege-HMV-Nummern

aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter - 50.45.01.1284

aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten - 50.45.01.1282

Bestellnummern

aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter

ohne FTL - 3544110

mit FTL - 3544114

aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten

ohne FTL - 3544111

mit FTL - 3544115