

Heegbach

Apotheke & Sanitätshaus



für ein Leben in Bewegung!

Rollstühle
2025




Bei eingeschränkter Mobilität durch Unfall, Krankheit oder Alter ist ein individuell angepasster Rollstuhl wichtig, um die Beinfunktion zu ersetzen. Moderne Rollstühle sind heute dank Innovationen praktischer, leichter bedienbar und optisch ansprechend.

Heegbach Apotheke & Sanitätshaus

64390 Erzhausen | Bahnstraße 92 | Telefon 06150 / 81919

sanitaetshaus@heegbach-apotheke.de

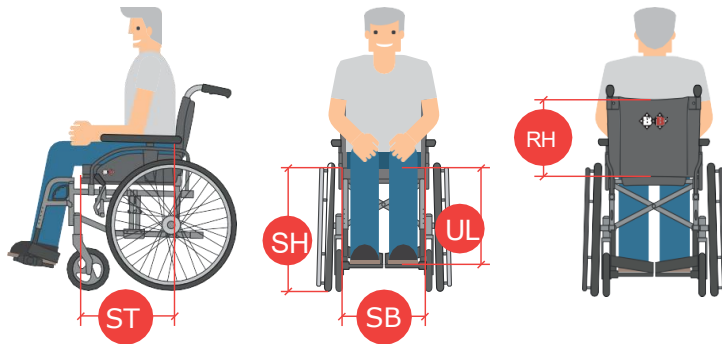

Sitztiefe (ST)

Um eine ideale Sitzhaltung, eine gleichmäßige Druckverteilung und eine stabile Beinführung zu gewährleisten, ist die Sitztiefe von großer Wichtigkeit. Die Messung erfolgt von der Vorderkante des Rückenrohrs bis zur Vorderkante der Sitzspannung.

Sitzbreite (SB)


Für die Sitzbreite misst man am Rollstuhl den Abstand zwischen den Seitenteilen. Am Körper wird die breiteste Stelle des Beckens im Sitzen gemessen. Die Faustregel lautet: Gesäßbreite + 4 cm (2 cm auf jeder Seite). Zwischen Hüfte und Seitenteil sollte allerhöchstens eine flache Hand passen.

Sitzhöhe (SH)

Man unterscheidet zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe. Die beiden Einstellungen beeinflussen maßgeblich die Sitzhaltung und ermöglichen ein optimales Antreiben des Rollstuhls. Die hintere Sitzhöhe bestimmt, wie tief man zwischen den Antriebsrädern sitzt. Das hat Auswirkungen auf den Zugriff auf die Greifreifen. Die vordere Sitzhöhe bestimmt die Sitzneigung. Eine optimale Sitzhöhe wird erzielt, wenn unter dem Fußbrett mindestens drei Zentimeter Spielraum sind und die Handinnenflächen bei nach unten hängenden Armen in etwa über der Radnabe liegen.

Unterschenkelhöhe (UT)

Die Unterschenkelhöhe bestimmt die Position des Fußbretts, welches sich in einem Mindestabstand von drei Zentimetern vom Boden befinden sollte. Die Knie sind im 90°-Winkel gebeugt, die Füße stehen stabil auf dem Fußbrett. Gemessen wird von der Kniekehle bis zur Unterkante der Fußsohle, inklusive Schuh. Am Rollstuhl misst man von der Oberkante der Sitzfläche bis zur Oberkante der Fußplatten, bzw. des Fußbretts. Dabei unbedingt das Sitzkissen berücksichtigen!

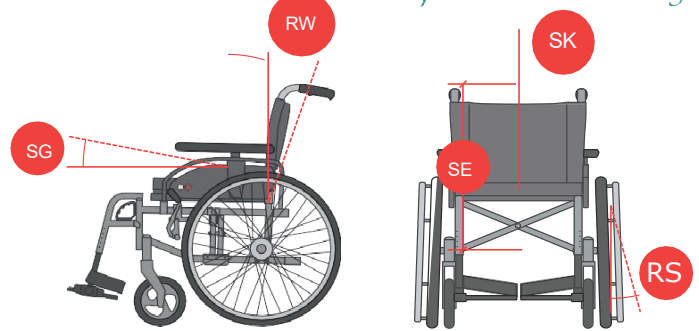

Rückenhöhe (RH)

Die Höhe der Rückenlehne ist abhängig von der individuellen Behinderung. Am Rollstuhl wird von der Oberkante des Sitzrohrs bis zur Oberkante des Rückengurts gemessen. Möchte man sich mit dem Rollstuhl selbst fortbewegen, sollte die Rückenlehne etwa einen Fingerbreit (1 - 2 cm) unterhalb der Schulterblätter enden. So verfügt der Nutzer über ausreichend Spielraum für die Schulterblätter, um die Greifreifen gut bedienen zu können.

Sitzwinkel (SG)

Das Sitzgefälle wird den individuellen Anforderungen des Nutzers entsprechend angepasst. Als optimal gilt ein Sitzgefälle, das vorne höher ist als hinten. In dieser Position ist das Bedienen der Greifreifen am einfachsten und zeigt die größte Wirkung.

Sitzkissen (SK)

Optional kann ein Sitzkissen gewählt werden. Es kann die Druckverteilung verbessern und somit der Entlastung dienen (Antidekubitus). Zusätzlich können Fehlhaltungen korrigiert und die Luftzirkulation verbessert werden.

Sitzeinheit (SE)

Die Sitzeinheit ist die Basis für eine gesunde Sitzhaltung. Eine optimale Balance zwischen Stützfunktion und Druckverteilung ermöglicht stundenlanges Sitzen und unterstützt den Nutzer in seiner Aktivität.

Rückenwinkel (RW)

Die Höhe der Rückenlehne hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung des Nutzers ab. Um ein möglichst aktives Sitzen zu ermöglichen, sollte die Rückenlehne einen Fingerbreit unterhalb der Schulterblätter enden. Um ein Vorrutschen zu vermeiden, darf der Rückenwinkel nicht zu aufrecht sein.

Radsturz (RS)

Ein Rollstuhl mit Radsturz lässt sich einfacher bewegen und ist wendiger. Die nach innen geneigten Antriebsräder erhöhen zusätzlich die Stabilität. Sport- und Kinderrollstühle verfügen in der Regel immer über einen Radsturz.

Ausstattung	Basis	ECO	Moly	Moly XL	Moly Click&Go
M-22 Standard-Seitenteile lang	x	x			
M-27 / 28 höhenverstellbare Seitenteile, als kurz / lang verwendbar, abklappbar			x	x	x
M-33 Beinstützen abnehmbar, nach außen und innen abschwenkbar	x	x	x	x	x
M-173 winkelverstellbare Fußplatten	x	x	x	x	x
M-117 / M-119 Steckachsen	x	x	x	x	x
Sitzbreite 53 / 56 cm				x	
M-180-182 Sitztiefe 40 - 42 - 44 cm einstellbar		x	x	x	x
M-58 Sitzkissen 6 cm		x	x	x	x
M-93 Stockhalter		x	x	x	x
M-5 Antikipp-Stützrollen	x	x	x	x	x
M-52 Passive Beleuchtung, Satz	x	x	x	x	x
M-106 PU-Bereifung für Vorderräder	x	x	x	x	x
M-122 PU-Bereifung für Hinterräder	x	x	x	x	x
M-154 Schiebegriffe 3-fach höhenverstellbar	x				
M-156 Anpassbarer Rückengurt			x	x	x
M-55 Sicherheitsgurt			x	x	x
M-64/D Trommelbremse für Begleitperson					x
Brems- und Schiebehilfe Click & Go Compact mit Akku und Ladegrät					x
Belastbarkeit	130kg	130kg	130kg	150kg	130kg



Alu-Leichtgewicht-Faltrollstuhl 2.920 Moly-Basis

Rahmen und Kreuzstrebe aus Aluminium
 Seitenteile, Beinstützen und Rückenrohre aus Aluminium
 Sitzhöhen von 47,5 cm bzw. 50 cm (Standard 50 cm)
 Sitztiefe 42 cm
 Rückengurthöhen von 38-42-46 cm (Standard 42 cm)
 Schiebegriffe 4-fach höhenverstellbar
 Seitenteile abklappbar und abnehmbar
 Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar
 Fußplatten winkelve stellbar
 Rahmenfarbe basaltgrau, Pulverbeschichtung
 Transportgewicht: 8,5kg
 Belastbarkeit: 130Kg

Sitzbreite	36	38	40	43	45	48	51
Sitzhöhe	42,5	45	47,5	50	52,5	55	
Sitztiefe	40	42	44	46	48	50	
Rückenhöhe	42						



Alu-Leichtgewicht-Faltrollstuhl 2.920 Moly-Economy

Rahmen und Kreuzstrebe aus hochfester Aluminium-Legierung
 Seitenteile, Beinstützen und Rückenrohre aus Aluminium
 Sitzhöhe 50 cm
 Sitztiefe 40-42-44 cm ohne Werkzeug einstellbar
 Rückenhöhe 42 cm
 Seitenteile abklappbar und abnehmbar
 Beinstützen abnehmbar, nach außen und innen abschwengbar
 Fußplatten winkelverstellbar
 Rahmenfarbe silber metallic
 Transportgewicht: 11kg
 Belastbarkeit: 130Kg

Sitzbreite	36	38	40	43	45	48	51
Sitzhöhe	42,5	45	47,5	50	52,5	55	
Sitztiefe	40	42	44	46	48	50	
Rückenhöhe	44						
Mit Aufpreis							



Auch mit Brems- und Schiebehilfe Click & Go Compact inkl. LiFePO4-Akku und Ladegerät erhältlich

Click & Go: HMV-Nr. 18.99.04.1025

Leicht und vielseitig – Alu-Leichtgewicht-Faltrollstuhl 2.920 Moly

Rahmen und Kreuzstrebe aus hochfester Aluminium-Legierung

Seitenteile, Beinstützen und Rückenrohre aus Aluminium

Sitzhöhen von 50 cm bis 42,5 cm (Standard 50 cm)

Sitztiefe 40-50 cm

Rückenhöhe von 36-46 cm (Standard 42 cm)

Seitenteile höhenverstellbar, abklappbar und abnehmbar

Beinstützen abnehmbar, nach außen und innen abschwenkbar

Fußplatten winkelverstellbar

Rahmenfarbe silber metallic

Transportgewicht: 11kg

Belastbarkeit: 130Kg // XL Version mit Breite 53/56cm bis 150Kg

XL bis
150kg



HMV-Nr. 18.50.02.3035

Sitzbreite	36	38	40	43	45	48	51	53/56
Sitzhöhe	42,5	45	47,5	50	52,5	55		
Sitztiefe	40	42	44	46	48	50		
Rückenhöhe	44							
Mit Aufpreis								

Der neue faltbare Reise-Elektro-Rollstuhl

Der Hubby ist der ideale Elektro-Rollstuhl für zu Hause auf Reisen oder beim Einkaufsbummel. Der faltbare Rahmen und das hochklappbare Fußbrett ermöglichen einen leichten Transport im Auto oder im Campingwagen. Zwei leistungsstarke Elektromotoren mit je 130 W nebst großem Lithium-Batteriepack mit 24 V / 12 Ah bringen Sie bis 20 km weit an Ihr Ziel. Wann starten Sie?



Basismodell mit Heckantrieb
Geschwindigkeit 6 km/h
Motoren 2 x 130 W
Lithium-Batterie 24 V / 12 Ah (288 Wh)
Ladegerät 24 V / 3 A
HB-33 Fußbrett hochklappbar
HB-11 Lenkräder 8" PU-bereift
HB-109 Antriebsräder 12½" x 2¼" luftbereift
Ladebuchse für USB-Geräte (Smartphone etc.)
Sitzbreite: 43cm / Sitztiefe 43cm / Sitzhöhe: 46cm
Rahmenfarbe: silber
Joystick-Bedienung rechts oder links
Verladegewicht: nur 19Kg
Reichweite: 20km

Außen-E-Rollstuhl AIRIDE SB Go!

Die neue Generation der compacten Airide Elektro rollstühle für den Innen- und Außenbereich überzeugt mit durchdachten Ausstattungsmerkmalen und modernem Design.



Grundrahmen aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
Einstellbare Federung an den Antriebsrädern
Antriebsräder 14" • Lenkräder 10",
Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar
Antikipp-Stützrollen serienmäßig
Hochleistungsmotoren 2 x 450W
Akkupack 2 x 12 V / 50 Ah
Ladegerät 24 V / 5 A
Stoßsichere Beleuchtungsanlage nach StVZO
Fester gepolsterter Sitz und Rücken
Rückenteil 4-fach mechanisch verstellbar 90-120°
und zum Transport nach vorne abklappbar
Leergewicht ohne / mit Batterien 69 kg / 95 kg
Max. Zuladung 160 kg
Rahmenfarbe silbergra
HMV-Nr. 18.50.04.0180



Nur 7 Kg

Ausstattungen:
Sitzbreite: 40 / 45 / 50 cm
Sitzhöhe: 53 cm
Sitztiefe: 42 cm
Rückenhöhe: 42 cm
Rahmenfarbe: silber
Steckachsen

Reise-Rollstuhl G-Logic Begleiterbremse



Nur 7 Kg

Ausstattungen:
Sitzbreite: 40 / 45 / 50 cm
Sitzhöhe: 53 cm
Sitztiefe: 42 cm
Rückenhöhe: 42 cm
Rahmenfarbe: silber
Steckachsen



PHMV-Nr. 50.45.07.2023

Ausstattung

Lenkräder 7" (PU)
Antriebsräder 24" (PU)
Steckachsen
Sitztiefe einstellbar
Sitzkissen anatomisch geformt
verstellbare Seiten- und Kniepelotten
Rückenhöhenverstellung
Komfortrücken
Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung
Stahl Seitenrahmen
Stahlkreuzstrebe, Seitenteilrohre,
Beinstützenrohre
Sitz- & Rücken Inkontinenzbezug
dreifach verstellbare Kopfstütze
Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar und
tiefeneinstellbar
gepolsterten Armauflagen
Beinstützen winkelverstellbar mit
Längenausgleich,
nach außen abschwenk- und abnehmbar
Fußplattenwinkel verstellbar
Wadenpolster
Fersenbänder
Schiebegriffe höhenverstellbar
Kniehebelbremse
passive Beleuchtung
Kippschutzrollen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

Trommelbremse
Abduktionspolster
Kopfstützenverlängerung
Beckengurt
Therapietisch
Armauflage (Hemiplegiker)



LEERGEWICHT**
38,7 KG (VAR. 1)
40,2 KG (VAR. 2)



BREITE
680 MM (VAR. 1)
730 MM (VAR. 2)



HÖHE
900 - 1200 MM



LÄNGE*
1040 MM



NUTZER
GEWICHT
125Kg



Gesunde Sitzhaltung und Unterstützung...

Häufig wird er auch als »Pflegerollstuhl« bezeichnet. Insbesondere dann, wenn er für geriatrische Versorgungen als Lagerungshilfe oder zur Unterstützung bei Verrichtungen des täglichen Lebens eingesetzt wird.





Die Kopfstütze unter den Nacken positionieren.



Die Schulterregion durch die Rückenlehne gut unterstützen.



Die Sitzeinheit sollte nach hinten gekantelt werden.



Der Nutzer sollte gerade sitzen.



Der Sitz sollte zusammen mit der Rückenlehne gekantelt werden.



Die Neigung der Rückenlehne sollte auf den Winkel der Beinstützen abgestimmt werden.

Sitzkissen

Hochwertige Rollstuhl-Sitzkissen bieten nicht nur erhöhten Komfort, sondern unterstützen auch eine gesunde Sitzhaltung und beugen Druckstellen sowie Schmerzen vor. Die meist beiliegenden Standardkissen erfüllen diese Anforderungen jedoch oft nur begrenzt. Daher kann es sinnvoll sein, in ein speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Kissen zu investieren.

Welches Sitzkissen für Sie optimal ist, richtet sich nach Ihren persönlichen Anforderungen. Anatomisch geformte, feste Kissen fördern vor allem das aufrechte Sitzen, während andere Varianten sich flexibel an Ihren Körper und verschiedene Sitzpositionen anpassen. Luftkammerkissen sind besonders bei einem erhöhten Dekubitusrisiko empfehlenswert, während Wabenkissen die Durchblutung verbessern. Die Auswahl ist vielfältig – eine kompetente Beratung unterstützt Sie dabei, das für Sie passende Sitzkissen zu finden, das Ihnen den größten Nutzen bietet.

Anti-Dekubitus-Kissen

Das Anti-Dekubitus-Kissen für den Rollstuhl sorgt für einen komfortablen und angenehmen Sitz – vor allem, wenn Sie den Rollstuhl über einen längeren Zeitraum nutzen. Dank der Luftzellen genießen Sie mit diesem hochwertigen Druckentlastungskissen höchste Sitzqualität. Zudem trägt es zu einer Verbesserung Ihrer Sitzposition sowie zur Dekubitus-Prophylaxe bei.



Rampen

Rampen helfen Ihnen, Hindernisse wie Treppen oder **Schwellen** ohne Stürze zu überwinden. Neben Modellen für die feste Installation gibt es mobile Rampen, die sich schnell auf- und abbauen lassen. Außerdem unterscheidet man zum Beispiel Stufenrampen, Schwellenrampen und Schienenrampen. Überlegen Sie sich bei der Auswahl vor allem, welche Hindernisse Sie wo meistern wollen und ob Sie dabei mit oder ohne Begleitperson unterwegs sind.




Teleskoprampen

Die Rampen sind aus robustem Aluminium gefertigt und verfügen über eine rutschfeste Friktionsbeschichtung. Sie bestehen aus zwei separaten Auffahrschienen, die jeweils in drei Segmente untergliedert sind und mit einer Arretierung ausgestattet sind, um ein unbeabsichtigtes Ein- oder Ausfahren der Segmente zu verhindern. Die Modelle der "LR"-Serie werden mit einer praktischen Tragetasche geliefert, die direkt am Rollstuhl befestigt werden kann. Teleskoprampen sind stets paarweise zu verwenden.

Terrassenrampe

aus Aluminium mit geriffelter, rutschfester Oberfläche und stufenlos verstellbarer Höhe. Die Rampe ist so gestaltet, dass sie sicher und stabil auf dem Boden aufliegt, wodurch eine feste Verankerung nicht erforderlich ist. Sie wird so positioniert, dass sie die obere Ebene der Türschwelle erreicht. Dank fehlender hervorstehender Kanten kann die Tür auch bei Nutzung der Rampe problemlos geöffnet werden.

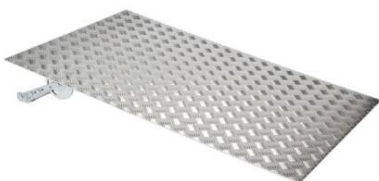



Zusatzantriebe kommen zum Einsatz, wenn normalerweise ein manuell betriebener Rollstuhl ausreichen würde, die verbleibende Kraft des Nutzers jedoch nicht ausreicht oder die Begleitperson nicht genügend eigene Kraft hat, um den Rollstuhl zu schieben.



Mittlerweile existiert eine breite Palette unterschiedlicher Zusatzantriebe, die verschiedene Funktionen erfüllen. Gemeinsam ist ihnen meist, dass sie als Nachrüstungen an manuellen Greifreifen-Rollstühlen angebracht werden, um den Rollstuhlfahrer oder die Begleitperson durch einen Elektromotorantrieb beim Manövrieren des Rollstuhls zu entlasten.

e-fix - der vielseitige Zusatzantrieb

der e-fix passt zu dir, wenn:

1. du dir einen leichten elektrischen Antrieb für deinen Rollstuhl wünschst.
2. du Wert auf einen kompakten Aufbau und kraftvolle Unterstützung legst.
3. du nach einem individuell einstellbaren Zusatzantrieb suchst.
4. du weiter deinen gewohnten Rollstuhl nutzen und nicht auf einen gewöhnlichen E-Rollstuhl zurückgreifen willst.
5. du dein Leben weiter aktiv gestalten willst und dabei unabhängig bleiben möchtest.
6. du dir ein absolut hochwertiges und intuitiv bedienbares Hilfsmittel wünschst.
7. du einen zuverlässigen Antrieb für einen Rollstuhl mit kleinem Raddurchmesser suchst.



bis 16km Reichweite



max. 120kg



0,5 - 6 km/h



bis 20% Steigung



erstattungsfähig



flugtauglich



18.99.05.1018



19,3 kg

Rollstuhlbekleidung und Schutz vor Witterung

Wenn Sie mit Ihrem Rollstuhl im Freien unterwegs sind, sind Sie verschiedenen Wetterbedingungen ausgesetzt. Passende Hilfsmittel für den Rollstuhl helfen dabei, Sie trocken und geschützt zu halten. Dazu zählen beispielsweise Schlupfsäcke oder Fußsäcke für kalte Tage, Regencapes sowie Handwärmer. Rollstuhlschirme können am Rollstuhl montiert werden und bieten je nach Bedarf Schutz vor Regen oder Sonne.



Sicherheitszubehör – Gurte und Co.

Gurte verhindern ein Abrutschen und tragen zu einer aufrechten Haltung bei. Im Handel erhalten Sie Oberkörper-Haltegurte genauso wie Bein- oder Fußgurte.

Für mehr Sicherheit sorgen auch Kippstützen, verstärkte Bremsen und eine zusätzliche Beleuchtung.

Sonstige Rollstuhl-Hilfsmittel

Abgesehen von den oben erwähnten Produkten gibt es eine große Auswahl an weiterem Zubehör für die Ausstattung von Hilfsmitteln, zum Beispiel:

- Stockhalter
- Einkaufsnetze und Transporttaschen
- Therapietische
- Aufsitzhilfen
- Speichenschutz
- Rollstuhlklingeln

Auch eine Wohnungsanpassung durch einen Treppenlift kann eine wertvolle Alltagshilfe darstellen. Wann gibt es Zuschüsse für Rollstuhl-Zubehör?



Unsere Treppenlifte werden genau angepasst. Unsere Techniker vermessen Ihre Treppe, um Ihnen einen maßgeschneiderten Einbauplan zu erstellen. Selbst bei zwei Etagen ist das oft günstiger, als viele erwarten.

Zuschüsse

Wichtig ist dabei:

Finanzielle Zuschüsse erhalten Sie für medizinisch notwendige Hilfsmittel. Zubehör, das lediglich den Komfort erhöht, müssen Sie in der Regel selbst bezahlen.

Ein ärztliches Rezept für das Rollstuhl-Hilfsmittel ist erforderlich. Achten Sie darauf, dass darin genau beschrieben wird, warum das Hilfsmittel benötigt wird.

Es gibt auch Unterschiede zwischen den Krankenkassen. Einige übernehmen Zuzahlungen für Hilfsmittel, die andere Krankenkassen nicht finanzieren.

Zu den Rollstuhl-Hilfsmitteln, für die Sie gute Chancen auf Unterstützung haben, zählen beispielsweise elektrische Zusatzantriebe oder spezielle Sitzkissen, vor allem wenn diese im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind. Ein Schlupfsack hingegen muss bei den meisten Krankenkassen meist komplett selbst bezahlt werden.

Wichtig ist, dass alles gut aufeinander abgestimmt ist

Rollstuhl-Hilfsmittel können Ihren Alltag deutlich komfortabler machen, Unfälle verhindern und Ihre Mobilität fördern. Voraussetzung ist, dass sie individuell auf Ihre Maße und Bedürfnisse angepasst sind und zu Ihrem Rollstuhl passen. Verzichten Sie möglichst auf Kompromisse, damit Sie langfristig davon profitieren. Dann lohnt sich auch eine höhere Investition in Sitzkissen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Preisliste	Preis
Moly Basis	390,00 €
Moly Basis Trommelbremse	420,00 €
Moly ECO	420,00 €
Moly ECO Trommelbremse	450,00 €
Moly	450,00 €
Moly Trommelbremse	480,00 €
Moly XL (53)	600,00 €
Moly XL (53) Trommelbremse	630,00 €
Moly Click & Go -45	2.400,00 €
Moly Click & Go XL 53-56	2.700,00 €
Reise-Rollstuhl G-Lite Pro	650,00 €
Reise-Rollstuhl G-Lite Comfort Begleiterbremse	750,00 €
Hubby - Faltbarer Reiserollstuhl elektrisch	2.800,00 €
Außen-E-Rollstuhl AIRIDE SB Go!	3.400,00 €
Triton-1 - Pflegerollstuhl 36-43	auf Anfrage
Triton-2 Pflegerollstuhl 43-50	auf Anfrage
Treppensteiger	auf Anfrage
Restkraftverstärker	auf Anfrage

Und was zahlt die Krankenkasse?



Sollten Sie ein Rezept für einen Rollstuhl von Ihrem Arzt erhalten haben, erhalten Sie als Kassenleistung einen Rollstuhl aus einem Wiedereinsatz (WE) mit lediglich 10€ Zuzahlung (es sei denn Sie sind von der Zuzahlung befreit)

Sie können jederzeit Ihr Rezept mit einer Eigenleistung auf einen höherwertigen neuen Rollstuhl erweitern. In jedem Fall wird der Erstattungsbetrag Ihrer Krankenkasse auf den Kaufpreis angerechnet.

Zubehör Moly	Preis	Basis	Eco	Moly	XL
Höhenverstellbare Beinstütze	140,00 €	x	x	x	x
Sicherheitsgurt	6,00 €	x	x	o	o
Sitztiefe 40/44/46	15,00 €		x	x	x
Sitztiefe 48/50	200,00 €		x	x	x
Sitzbreite 36	120,00 €		x	x	x
Sitzbreite 38	45,00 €		x	x	x
Sitzbreite 53/56	- €				x
Sitzhöhe 55	220,00 €		x	x	x
Sitzhöhe 45	75,00 €		x	x	x
Sitzhöhe 52,5	130,00 €		x	x	x
Sitzhöhe 42,5	75,00 €		x	x	x
Einhandbremse Fahrer	200,00 €		x	x	x